

eSvar till Asynja

För att komma igång med eSvar till Asynja krävs ett par konfigurationer och installationer i Asynjas miljö.

Installation och konfiguration av BTC

1. Installation av kommunikationsklient (*Business Transaction Client*)
Installation av BTC måste göras. BTC hämtas från <https://office.infosolutions.se>
Logga in som esvar, med lösen esvar.

Programvaran finns under CustomerDownloads/eSvar

Ladda ner det installationspaket av BTC 4.2 som passar er server (64 bitar eller 32 bitar)

2. Starta BTC_konfig.exe och konfigurera enligt nedan
Uppgifter om användare och lösenord erhålls av InfoSolutions.

Användare	Erhålls från InfoSolutions
Lösenord	Erhålls från InfoSolutions
Server	esvar.infosolutions.se
Port	8220

Klicka på fliken "Sökvägar"

Utgående meddelanden	Sökväg där BTC ska titta efter filer för att skicka. Används endast vid behov.
Inkommande meddelanden	Sökväg där BTC lägger de hämtade filerna. Sökvägen måste fyllas i och utpekad katalog måste finnas.

<i>Utökad kontroll av Asynjasvar</i>	<p>Klicka i denna för att InfoSolutions ska kunna ge utökad loggning och bevakning på hela tjänsten. BTC rapporterar då tillbaka status på varje inläst svar från Asynja.</p> <p>Om Utökad kontroll används måste sökväg för utgående meddelanden fyllas i och finnas.</p>
--------------------------------------	---

När uppgifterna är ifyllda klickar man "ok" och kommer till själva BTC. Alla inställningar sparas i en krypterad ini-fil.

3. Installera BTC som tjänst

Klicka på fliken "Inställningar" igen och klicka på knappen Installera tjänst. Klart.

För att starta tjänsten gå till kontrollpanelen/tjänster eller starta BTC_konfig.exe på nytt (stäng av och starta igen) och klicka på knappen "Starta tjänst".


Konfiguration av Asynja

Konfigurera import av laboratoriesvar

Gå till: Administration=> Systeminställningar => Bakgrundsjobb => Inställningar för laboratoriesinläsning



Inställningar för labsvars inläsning

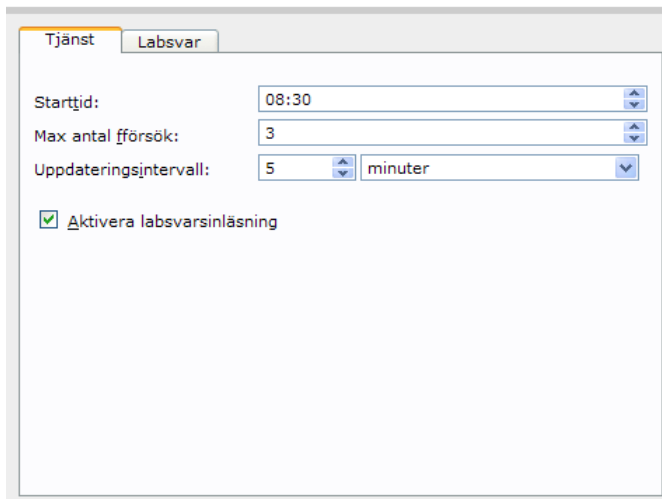

Tjänst Labsvar

Starttid: 08:30

Max antal försök: 3


Uppdateringsintervall: 5 minuter

Aktivera labsvarsinläsning

Sätt starttiden till 08:30 för att vara säker på att importfunktionen återstartas efter eventuella nattliga serveromstarter, och aktivera labsvarsinläsningen.

Låt uppdateringsintervallet vara ca 2-5 minuter.

Välj fliken labsvar

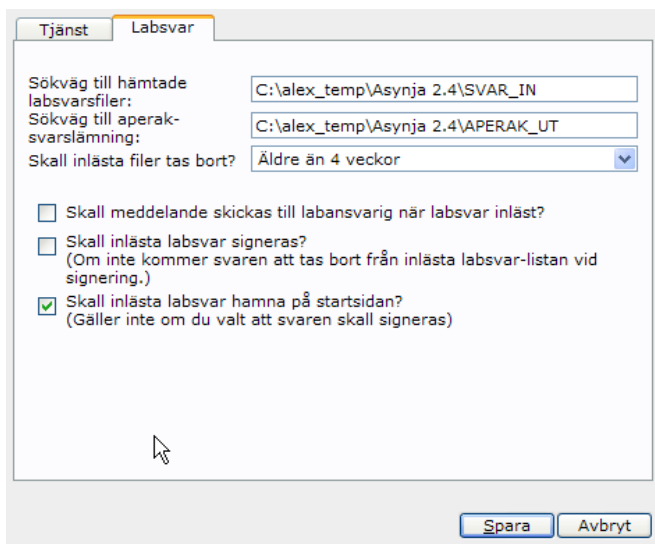

Tjänst Labsvar

Sökväg till hämtade labsvarsfiler: C:\alex_temp\Asynja 2.4\SVAR_IN

Sökväg till aperak-svarslämning: C:\alex_temp\Asynja 2.4\APERAK_UT

Skall inlästa filer tas bort? Äldre än 4 veckor

Skall meddelande skickas till labansvarig när labsvar inläst?

Skall inlästa labsvar signeras?
(Om inte kommer svaren att tas bort från inlästa labsvar-listan vid signering.)

Skall inlästa labsvar hamna på startsidan?
(Gäller inte om du valt att svaren skall signeras)

Spara Avbryt

Ställ in sökväg där Asynja ska hämta upp laboratoriesvar

(OBS. sökväg till aperak-svarslämning ska inte fyllas i annat än undantagsfall)

Välj att svar äldre än 2 veckor ska raderas

Kryssa i rutan för att inlästa svar ska hamna på startlistan.

Klicka på Spara !

Klart !